

# Система эвакуации анестезирующих газов



# Описание устройства

Система эвакуации анестезирующих газов предлагает медицинским организациям удобное, надежное и простое в обслуживании средство, обеспечивающее непрерывную централизованную откачку анестезирующих газов.


Система имеет большое значение для безопасного нахождения в операционной, родильном отделении или палате реанимации, так как излишки и остатки анестезирующих газов могут быть очень вредны для медицинского персонала и пациентов даже при низких концентрациях.

## Состав системы эвакуации анестезирующих газов

1 Центральная панель управления

2 Рама

3 Вихревой вакуумный насос

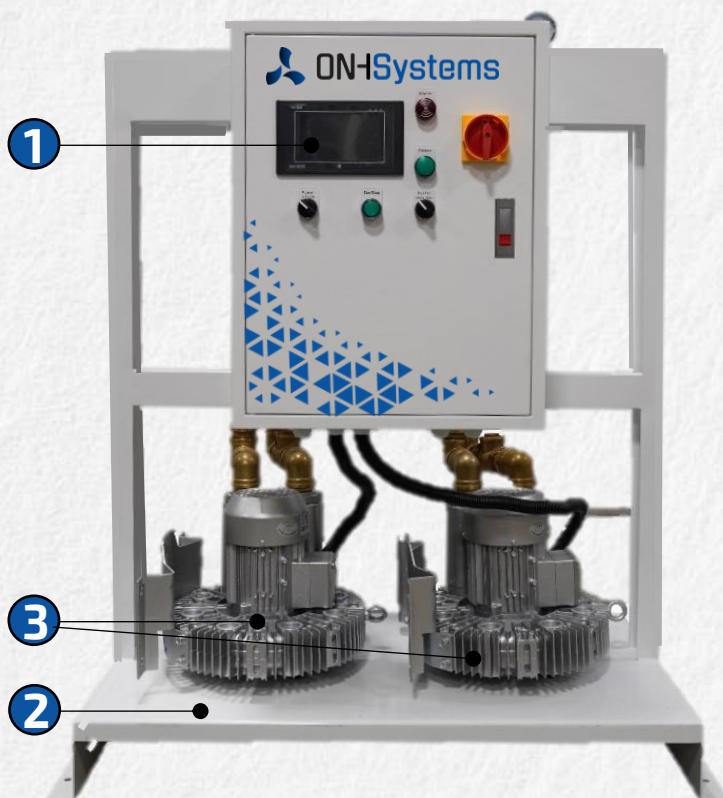

## Основные особенности

- Соответствует ГОСТ ИСО 8835-3-2012.
- Вихревые вакуумные насосы обеспечивают продолжительную работу в режиме 24/7. Могут быть в одиночном или двойном исполнении (с резервированием).
- Может комплектоваться пультом удаленного управления и адсорбером для сбора закиси азота или других анестезирующих газов во время анестезии или седации.
- Включает обратный клапан и систему фильтрации.
- Удаленно оповещает о тревогах.

# Технические характеристики

Основные характеристики системы эвакуации анестезирующих газов

Модель*	Производительность, л/мин	Производительность, Нм <sup>3</sup> /час	Максимальный разряжение, мбар	Марка воздуходувки	Электрическая мощность, кВт	Параметры сети
СЭАГ-145-0	1x2410	1x145	-160	2GH 410-H16	1x0,85	380 В, 50 Гц
СЭАГ-145-Д	2x2410	2x145	-160	2GH 410-H16	2x0,85	
СЭАГ-210-0	1x3500	1x210	-170	2GH 510-H16	1x1,3	
СЭАГ-210-Д	2x3500	2x210	-170	2GH 510-H16	2x1,3	
СЭАГ-345-0	1x5750	1x345	-200	2GH 630-H16	1x2,2	
СЭАГ-345-Д	2x5750	2x345	-200	2GH 630-H16	2x2,2	
СЭАГ-416-0	1x6930	1x416	-220	2GH 730-H26	1x3	
СЭАГ-416-Д	2x6930	2x416	-220	2GH 730-H26	2x3	
СЭАГ-УП	Пульт для удаленного управления станцией отвода анестезирующих газов					

\* Тип насосов — безмасляный.

\*\* СЭАГ-145-0:

СЭАГ — система эвакуации анестезирующих газов, 145 — производительность (Нм<sup>3</sup>/час),  
0/Д — одиночная/дуплексная.

## Интуитивно понятная панель управления

Система эвакуации анестезирующих газов очень проста в использовании благодаря интеллектуальной панели управления.



Панель управления позволяет:

- переключаться между вакуумными насосами;
- осуществлять удаленное управление;
- получать уведомления об ошибках;
- информировать о необходимости проведения технического обслуживания.





ООО «ОНХ Системс»  
Группа компаний 4С

 +7 495 150 44 22

 [info@onhs.ru](mailto:info@onhs.ru), [sales@onhs.ru](mailto:sales@onhs.ru)

 [www.onhs.ru](http://www.onhs.ru)